


CAESAS HYDRA



多彩な治療メニュー & プログラム機能


マッサージパターンは、標準搭載の「システムプログラム」(8種)と、お客様が自由に設定できる「オリジナルプログラム」(最大5種)の中から選べます。

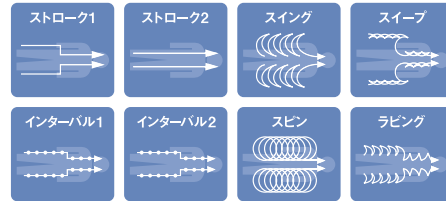

主な仕様

| | | |
|---------|-----------------------------------|------------------|
| 販売名 | シーザス・ハイドラ HS-20 | シーザス・ハイドラ HS-21 |
| 認証番号 | 220AGBZX00225000 | 220AGBZX00226000 |
| 一般的名称 | ベッド型マッサージ器 | |
| クラス分類 | 管理医療機器 / 特定保守管理医療機器 | |
| 電源 | 三相200V (50/60Hz) | 単相200V (50/60Hz) |
| 電源入力 | 4kVA | 4.5kVA |
| 外形寸法 | 820(W)×2350(L)×960(H)mm(シート高500H) | |
| 水槽容量 | 約250L | |
| 質量 | 約210kg(注水時約460kg) | |
| 保護分類 | クラスI永久設置形 B形装着部 | |
| 強さ調節 | 6段階(1~5、ハイパワー) | |
| 予熱温度 | 25~40℃ | |
| 治療プログラム | システムプログラム8種、オリジナルプログラム5種 | |
| 使用条件 | 最大搭乗質量100kg、室温10~28℃を推奨 | |
| 機能 | 週間予熱タイマー、自動エア抜き機構、強弱噴射選択機能 | |

外形寸法図

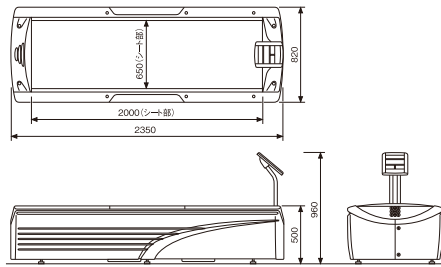

オプション

| | |
|-------|----------|
| 手摺(長) | HS10-101 |
| 手摺(短) | HS10-102 |
| リモコン | HS20-001 |



運転・停止・強度調節のできるリモコン、移乗用手摺もご用意しています。

CAESAS HYDRA

ベッド型マッサージ器 シーザス・ハイドラ HS-20/HS-21

それは、「ジェット水圧」の心地よさ。



●印刷インク等の都合上、掲載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ●仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



株式会社 神戸メディケア



0120-35-8866

<http://www.taisya.net/>

神戸本社 〒652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目4-21 シェンブルク神戸 1F
TEL: 078-671-5656 FAX: 078-671-5659

<http://www.sokusin.net/>

東京銀座支店 〒104-0061 東京都中央区銀座 7-17-11 銀座大雄ビル 6F
TEL: 03-6264-7337 FAX: 03-3248-3425

<http://www.onyokuki.com/>

ハイパワー
モード搭載

出力約20%UP
(当社比)

OGGIKEN

パワフルな「水圧刺激」の心地よさ

マッサージ力がぐんとパワーアップ。指圧のような力強い感触で、全身を効果的にマッサージします。

出力
比較



HS-10/11
レベル5



HS-20/21
ハイパワーモード

ハイパワー
モード搭載

出力約**20%**UP
(当社比)



力強い水圧のハイパワーモード

噴射ノズルの出力を約20%アップした「ハイパワーモード」を搭載。従来の5段階にハイパワーモードを加えた「6段階モード設定」から、身体の状態に適した強度でマッサージできます。



ハイパワーボタン

ハイパワーボタンを押すと全ての強さランプが点灯し、ハイパワーモードになります。



やさしく、使いやすい設計&操作パネル

快適な水温で、全身マッサージ

夏場の連続使用時も快適な水温をキープ。水温上昇によるオーバーヒートの心配もありません。

静かな動作音

動作音を低くし、独自のエア抜き機構により、治療中の耳障りな空気音も解消しています。

治療中の揺れを最小限に

オリジナルの消波設計に加え、水流の強弱噴射選択機能[®]を採用。治療中の揺れを最小限に抑え、船酔い現象を緩和します。

※治療メニュー「インターバル・ラッピング」のみ有効。

低床設計で、らくに乗り降り

シート面の高さは50cmの低床設計。高齢者でもらくに乗り降りできます。



見やすく使いやすい操作パネル

- 操作パネルは、頭側・足側のどちらでも取り付けOK。
- 週間予熱タイマー。(長期休暇設定付き)
- 治療中と治療終了を知らせる、お好みメモディ機能付き。

